



# Pro-care Turn

## Programmerbar Vändmadrass

- Lämplig för patienter med hög till mycket hög risk att drabbas av trycksår
- 30° dubbelsidig rotationsbehandling för att öka tryckavlastningen
- 3-i-1-behandling möjlig för individuell vårdplan med programmerbar lateral positionsändring
- Utformad för användning inom alla vårdmiljöer



Vård för ett friskare liv

**APEX**



# Pro-care Turn

Programmerbar vändmadrass

*"En vändpunkt för bättre patientvård"*



## Överdrag

- 4-vägsstretch
- Lågfriktionsöverdrag i PU
- Ångpermeabelt överdrag



Effektiv tryckavlastning genom dubbelsidig rotation  
Kartläggningen av tryck nedan visar en kliniskt bevisad tryckavlastning vid en vändning på 30°

Position	Vändning vänster	Ryggläge	Vändning höger
32 mmHg (30°)	97 %-99 %	95 %	97 %-99 %

Tryck Kartläggning (Vikt 75 kg)	Vändning vänster	Ryggläge	Vändning höger



## Sittfunktion

Funktion för extra stöd i sittande läge



## Kabelränna

Minskar snubbelrisk och ger en tryggare vårdmiljö



## Komfort Stabilitet

### Sidobolster

Längsgående luftceller utmed madrassens långsidor som ger stöd åt patienten vid vändning



Hälavlastningsfunktion  
De 5 nedersta luftcellerna kan individuellt tömmas på luft för att helt avlasta hälen





## Ljud och ljuslarm

- Larmar vid:
- Lågt tryck
  - Strömavbrott
  - Teknisk support

## Transportläge

Madrassen håller luften i ca 6 timmar vid strömavbrott eller patienttransport.

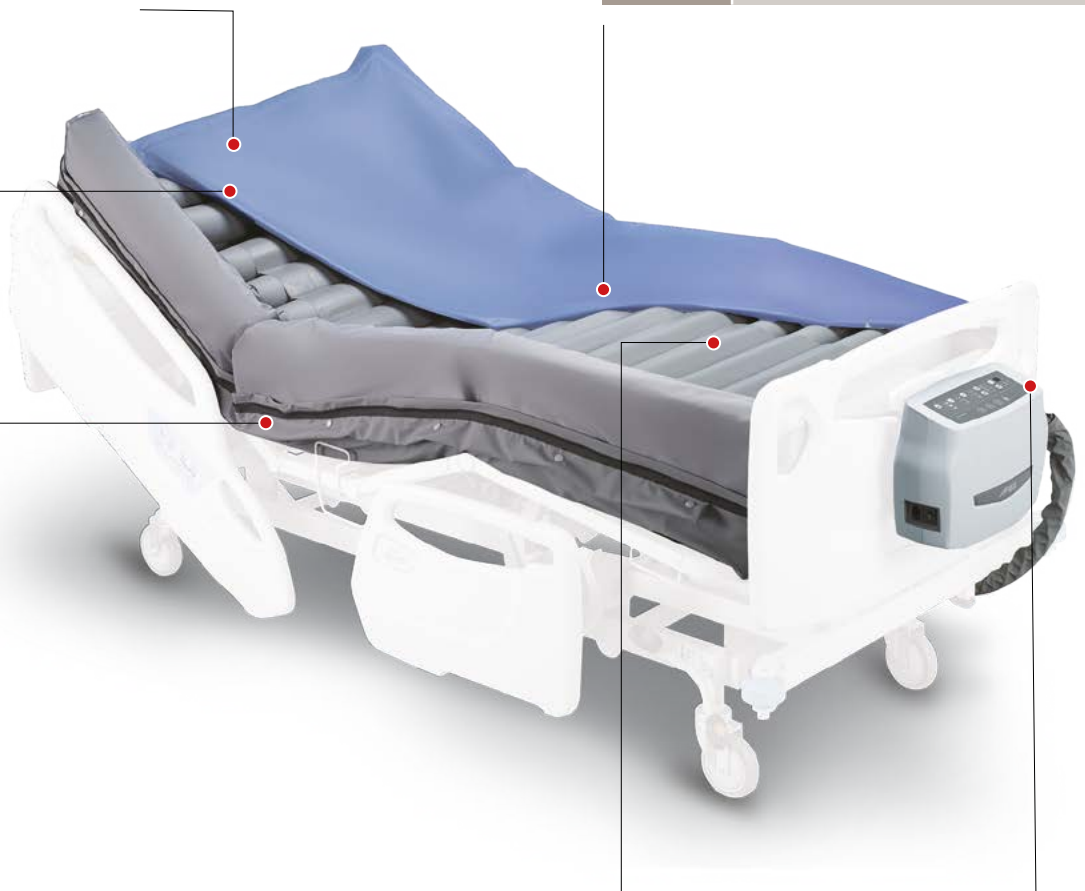

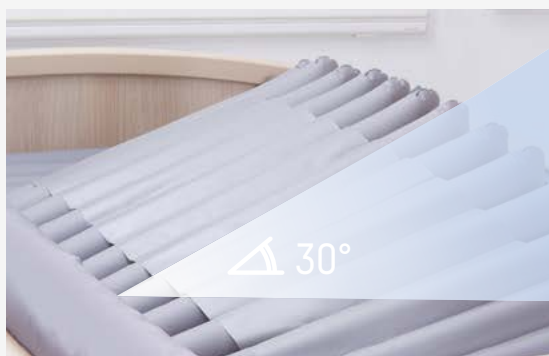

## Ökad tryckavlastning genom 30° dubbelsidig rotation

Dubbelsidig rotation kan minska trycket på patientens hud markant samtidigt som den ökar blodcirkulationen. <sup>\*1\*2</sup>


30 graders vändning inte bara överensstämmer med kliniska riktlinjer utan ger också maximal komfort. <sup>\*3</sup>

Referenser:

\*1 Peterson MJ et al., Effects of turning on skin-bed interface pressures in healthy adults. Journal of advanced nursing. 2010

\*2 Peterson MJ et al., Patient repositioning and pressure ulcer risk—Monitoring interface pressures of at-risk patients, JRRD 2013

\*3 Prevention and Treatment of Pressure Ulcer: Clinical Practice Guideline (NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014)

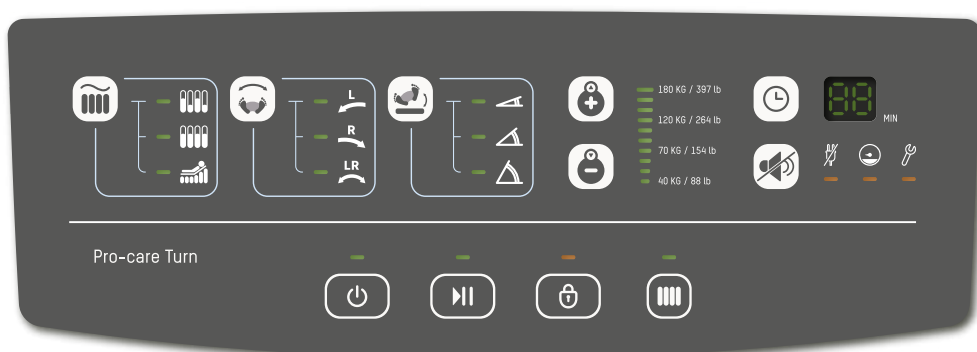

### Behandlingslösningar 3 i 1 för optimal patientkomfort och god arbetsmiljö

- Växeltryck, Kontinuerligt lågt tryck och Vändfunktion som kan ställas in efter individuella behov



### Anpassad för optimalt resultat

- Valbara vändningsvinklar och trycknivåer för individuella behov
- Underlättar för vårdgivare vid lägesändringar i säng



### Funktion för rotationspaus

- Madrassen kan "frysas" i ett specifikt läge, t.ex vid omvårdnad



### Alltid säker för huden

- Växelvis läge sätts automatiskt igång för att säkerställa oavbruten tryckavlastning under rotationsbehandling när kroppen flyttas till en sida

## Specifikation

Modell	Pro-care Turn	5" Ersättning
Pumpens	Mått	34,1 x 16,5 x 26,0 cm
	Vikt	4,5 kg
	Ytmaterial	flamsäker ABS
	Strömförsörjning	230 V/50 Hz
	Cykeltider vid växeltryck	10, 15, 20, 25 min.
	Vändningsfrekvens	10, 20, 30, 60 min.
Madrassens	Mått	200 x 90 x 13 cm, sidobolster 25 cm
	Cellhöjd	13 cm celler med vändningsceller i botten från 4:e till 12:e
	Vikt	11,4 kg
	Överdragsmaterial	4-vägsstretch
	Cellmaterial	TPU
	Maximal patientvikt	180 kg
	Flamskyddsstandarder	EN 597-1 & EN 597-2

## HUVUDKONTOR

Apex Medical Corp.  
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng,  
New Taipei City, 23679, Taiwan  
Tel. +886 2 2268 5568  
Fax +886 2 2268 6525  
marketing@apexmedicalcorp.com

## ASIEN

### TAIWAN

Apex Medical Corp.  
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng,  
New Taipei City, 23679, Taiwan  
Tel. +886 2 2268 5600 /0800 054 133  
Fax +886 2 2268 6526  
customer@apexmedicalcorp.com

### STURDY INDUSTRIAL

168, Sec.1, Zhongxing Road, Wugu District,  
New Taipei City 24872, Taiwan  
Tel. +886 2 2981 5245  
Fax +886 2 2984 8208  
foreign@sturdy.com.tw  
www.sturdy.com.tw

### KINA

Apex Medical (Kunshan) Corp.  
No. 1368, Zizhu Road, Kunshan,  
Jiang Su Province, China  
Tel. +86 512 8617 1660 Ext 1150  
Tel. +86 512 8617 1660 Ext 1150  
customer.cn@apexmedicalcorp.com

### INDIEN

Apex Medicalcorp India Pvt. Ltd.  
303, Third Floor Block 4A DLF  
Corporate Park Phase-III,  
Gurgaon, Haryana  
Tel. +91 11 6654 4138  
Fax +91 11 6654 4052  
enquiries.india@apexmedicalcorp.com

### THAILAND

Apex Medical Thailand  
65/100 Chamnanphenjati Business Center  
Bldg.  
11/F Rama 9 Road, Huaykwang  
Bangkok 10320  
Tel. +662 948 4848  
Fax +662 948 4170  
sales.thai@apexmedicalcorp.com

### MELLANÖSTERN • AFRIKA

29, Misr Littameer Building,  
Stree#10, AREA#8, Sheraton Building  
Heliopolis Cairo, Egypt.  
Tel. +202 2 2671303  
Fax +202 2 2678649  
raafat.wahby@apexmedicalcorp.com

## EUROPA

### SPANIEN

Apex Medical S.L.  
Elcano 9, 6ª planta 48008  
Bilbao. Vizcaya. Spanien  
Tel. +34 94 4706408  
Fax +34 94 4706409  
info@apexmedical.es

### STORBRITANNIEN

Apex Medical Limited  
Unit 21, Optima Park, Thames Road,  
Crayford, Kent DA1 4QX  
Tel. +44 (0) 132 2520 560  
Fax +44 (0) 132 2554 182  
enquiry@apexmedicalcorp.co.uk

### FRANKRIKE

Apex Medical France  
4 Boulevard de la Chanterie  
49124 Saint-Barthelemy d'Anjou  
Frankrike  
Tel. +33 2 72 79 27 13  
Fax +33 2 85 73 07 67  
info.france@apexmedicalcorp.com

### TYSKLAND

SLK Vertriebsgesellschaft GmbH  
Lindenhorster Straße 38-40 44147  
Dortmund  
Tel. +49 (0)231-925360-175  
Fax +49 (0)231-925360-29  
info@slk-gmbh.de  
www.slk-gmbh.de

## AMERIKA

### USA

Apex Medical USA  
927 Mariner Street,  
Brea, CA 92821, USA  
Tel. +1 714 671 3818  
Fax +1 714 494 8173  
sales.usa@apexmedicalcorp.com

Distribuerad av